




关注微信号: ynzehao



关注QQ号: 4008700545

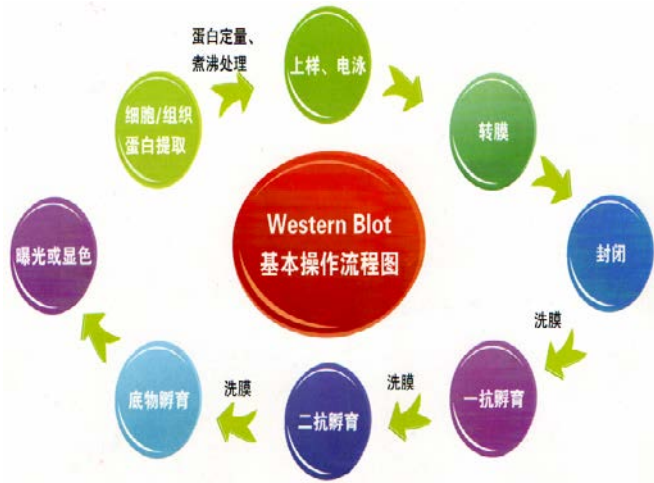

品编号	P0013B	P0013C	P0013D
产品名称	RIPA 裂解液(强)	RIPA 裂解液(中)	RIPA 裂解液(弱)
有效裂解成分	1% Triton X-100 1%脱氧胆酸钠 0.1% SDS	1% NP-40, 0.5%脱氧胆酸钠 0.1% SDS	1% NP-40, 0.25%脱氧胆酸钠
裂解强度	强	中	温和
含蛋白酶抑制剂	是	是	是
含磷酸酯酶抑制剂	是	是	是
主要用途	WB, IP	WB, IP	WB, IP, co-IP

第一步——样品抽提与制备 / 蛋白酶抑制剂

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销价	品牌
P0013B	RIPA 裂解液(强)	传统的细胞组织快速裂解液。裂解得到的蛋白样品可以用于常规的 Western、IP 等。使用前需加入蛋白酶抑制剂如 PMSF 或者根据需要再加入亮抑蛋白酶肽 (leupeptin), 抑肽酶 (Aprotinin)等其它抑制剂。 需自备 PMSF	100ml	瓶	电询	
P0013C	RIPA 裂解液(中)					
P0013D	RIPA 裂解液(弱)					
P0013F	NP-40 裂解液	主要成分为 50mM Tris(pH7.4), 150mM NaCl, 1% NP-40 以及 正钒酸钠 , EDTA 等多种抑制剂温和裂解液	100ml	瓶	电询	
P0013	Western 及 IP 细胞裂解液 需自备 PMSF	在非变性条件下裂解细胞的裂解液,主要成分为 20mMTris (pH7.5), 150mMNaCl, 1% Triton X-100, 以及正钒酸钠, β-glycerophosphate, EDTA, Na3VO4, leupeptin 等抑制剂,	100ml	瓶	电询	
P0027	细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒	简单、方便的从培养细胞或新鲜组织中抽提核蛋白与浆蛋白的方法。抽提得到的蛋白为非变性, 有活性, 用于 WB、EMSA 等	50 次	盒	电询	
P0028			100 次			
P0033	细胞膜蛋白与细胞浆蛋白提取试剂盒	抽提的膜蛋白不仅包括质膜上的膜蛋白, 也包括线粒体膜、内质网膜和高尔基体膜等上的膜蛋白。	100 次	盒	电询	
C3702	红细胞裂解液(无菌)	用于经酶消化分散的组织细胞的分离纯化, 淋巴细胞的分离纯化以及组织细胞蛋白与核酸提取等实验中红细胞的去除。	120ml 500ml	瓶 瓶	电询	
ST506	PMSF(100mM) 蛋白酶抑制剂	苯甲基磺酰氨 蛋白酶抑制剂 , 用于胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶的抑制剂, 100 mM 贮存液即用即配, 含粉末和配制液 10ml。	10ml	瓶	电询	
ST1650	正钒酸钠	磷酸酯酶抑制剂 , 在提取蛋白时常用于保持蛋白的磷酸化状态	10g	瓶	电询	
P1005	蛋白酶抑制剂混合物(通用型, 100X)	含 EDTA, 100X DMSO 储液, 6 种广谱蛋白酶抑制剂的混合物, 包含广谱的丝氨酸、半胱氨酸和酸性蛋白酶、氨基肽酶抑制剂。	1ml	瓶	电询	
P1006			5ml			
P1045	蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(通用型, 50X)	包含了广谱的丝氨酸、半胱氨酸和酸性蛋白酶抑制剂/氨基肽酶抑制剂, 及丝氨酸/苏氨酸、酪氨酸、酸性及碱性磷酸酶抑制剂。	2ml	瓶	电询	
P1010-2L	即用型 PBS 粉剂	1 袋可配制 2L, 溶解后 pH 在 7.2-7.4 之间, 无悬浮沉淀	可配置 2L	袋	电询	
G6521	Protease Inhibitor Cocktail, 50X 蛋白酶抑制剂混合物	蛋白酶抑制剂混合物, 50 X 是针对不同靶标蛋白酶的六种不同蛋白酶抑制剂的混合物。该产品以冻干的形式提供, 可用 100% 乙醇或 DMSO 重悬。	1ml	瓶	电询	
11697498001	cComplete™ 蛋白酶抑制剂 Cocktail	具广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂混合物用于细菌、酵母及动植物细胞提取物种的丝氨酸、半胱氨酸及金属蛋白酶的抑制。	20 片 50ml/片	PK	电询	
04906845001	PhosStop™ 磷酸酶抑制剂 铝箔包装	广泛抑制蛋白去磷酸化; 也可有效持续抑制包括酸性和碱性磷酸酶、丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶和酪氨酸蛋白磷酸酶在内的多种磷酸酶	10 片	PK	电询	
04906837001			20 片 10ml/片			

蛋白定量

货号	产品名称	规格	单位	特价	品牌
P0010S P0010 P0009	BCA 蛋白浓度测定试剂盒(增强型) 和普通 BCA 蛋白浓度测定试剂盒相比, 灵敏度更高, 检测浓度下限达到 10 μg/ml, 最小检测蛋白量达到 0.2 μg, 待测样品体积为 1-20 μl	200 次微孔板 500 次微孔板 5000 次微孔板	1kit	电询	
P0006	Bradford 蛋白定量测定试剂盒 考马斯亮蓝染色法, 该方法测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的化学物质的影响, 如蛋白还原类物质 DTT、β-巯基乙醇等, 最小蛋白检测量达 0.5 μg	1000T	1kit	电询	
ST1119	考马斯亮蓝 G-250 蛋白定量用	1g	瓶	电询	
P0007	蛋白标准(5mg/ml BSA) 用于蛋白浓度测定时绘制标准曲线	1ml	支	电询	
F8060	福林酚 常用于 Lowry 方法进行总蛋白定量	100ml	瓶	电询	



样品浓缩、脱盐、更换缓冲液 在组织、细胞的破碎机抽提过程中, 蛋白样品往往被稀释, 而且带有高盐成分, 使其不能直接用于 WB 分析, 所以您需要超滤来处理蛋白样品。

选择小软件, 敬请咨询



超滤管应用领域

- 病毒和噬菌体的浓缩
- 核酸纯化、浓缩及脱盐
- 未结合标记物的去除
- 抗体的快速浓缩
- 样品中去垢剂的去除
- 酶的浓缩、脱盐
- 双向电泳样品的制备
- 尿液的浓缩

货号	产品名称	规格	处理量	优惠价
UFC5003	离心超滤管 Amicon Ultra-0.5 适合 1.5ml 离心机转子	单个购买	0.5ml	电询
倒转离心回收样品	Amicon Ultra-0.5 按整包装购买特价 30K 以上价格不同; 分子量可选: 3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	15-20ul	电询
UFC8003	离心超滤管 Amicon Ultra-4 适合 15ml 离心机转子	单个购买	4ml	电询
吸头回收样品	Amicon Ultra-4 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选: 3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	15-70ul	电询
UFC9005	离心超滤管 Amicon Ultra-15 适合 50ml 离心机转子	单个购买	15ml	电询
吸头回收样品	Amicon Ultra-15 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选: 3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电询
		96 个/盒	200ul	电询
YA1080	USA 透析袋 直径 25 (36 mm 可选)	(MW):3500	5 米/卷	电询
YA1076	USA 透析袋 直径 34mm	(MW):7000	5 米/卷	电询
YA1071	USA 透析袋 直径:25mm (34mm、77mm 可选)	8000-14000	5 米/卷	电询
YA1090	国产透析夹 长度 4 (6、8cm 可选)		个	电询

第二步——电泳和转膜、封闭 SDS-PAGE 电泳

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销	品牌
P0465S	BeyoGel™ Plus PAGE 预制胶(Tris-Gly) 10孔、15孔可选 胶尺寸: 81×74×1.5mm	浓度 8%,10%,12%,4-15%,4-20%,8-20%可选 手工制胶过程中难免接触有毒挥发性物质且制胶耗 费时间长, 花 2 小时制胶? 漏胶? 有残留? 快速让 您开始蛋白电泳的利器----蛋白预制胶	10 片/盒	盒	电询	
P0014C	SDS-PAGE 电泳液	(Tris-Gly,10X)预制胶专用 (10×) 用于变性蛋白电泳	100ml	瓶	电询	
P0014F	非变性 PAGE 电泳液	(Tris-Gly, Powder)预制胶专用, 用于非变性蛋白电泳	1L	瓶	电询	
P0012AC	SDS-PAGE 凝胶快速配制试剂盒	用户只需自备制胶器具和蒸馏水, 即可制备高 质量各种浓度的变性 PAGE 凝胶	30-50 块胶	盒	电询	
A1010	30% Acr-Bis (29:1)	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1)溶液(30%)	100ml 500ml	瓶	电询	
A1011	40% Acr-Bis (29:1)	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(29:1)溶液(40%)	500ML	瓶	电询	
A1025	40% Acr-Bis (37.5:1)	丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺(37.5:1)溶液(40%)	500ML	瓶	电询	
T1020	1M Tris-HCl, pH6.8	采用进口 Tris、浓盐酸配制而成, 常用于蛋白 质电泳制胶用缓冲液。	100ml	瓶	电询	
T1010	1.5M Tris-HCl, pH8.8		500ml			
S1010	10% SDS	可以用于 SDS-PAGE、细菌碱裂解等	100ml	瓶	电询	

电泳和转膜、封闭等其他辅助试剂、耗材、配件

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销	品牌
T1070	5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	用于 SDS-PAGE 时的蛋白电泳缓冲液	500ml	瓶	电询	SDS-PAGE 电泳 
P1017	4×非变性蛋白上样缓冲液	主要成份为 SDS, (DTT), 溴酚蓝, 缓冲盐溶液等, 不含剧毒的巯基乙醇	10ml	瓶	电询	
P1040	5×蛋白上样缓冲液(含 DTT)		10ml	瓶	电询	
P1300	考马斯亮蓝快速染色液	以考马斯亮蓝 R250 为染料, 蛋白电泳胶的常规染色, 或 Western 转膜后 PAGE 胶上残余蛋白的检测半小时可检测	500ml	瓶	电询	
P1305	考马斯亮蓝染色套装	染色液 100ML+脱色液 500ML 以考马斯亮蓝 R250 为染料	1 套	套	电询	
D1060	10×电泳转膜液	湿法以及半干法电泳转膜的缓冲试剂	500ml	瓶	电询	
T1080	20 x TBS 浓缩液	清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体	500ml	瓶	电询	
T1081	10 X TBST 缓冲液	pH 7.5, 用于清洗 WB 中蛋白印迹膜, 或者配制封闭液	500ml	瓶	电询	
P0012	10X 丽春红染色液	猩红, 可逆染色, 检测转膜效率	10ml	瓶	电询	
SW3020	蛋白印迹膜再生液	洗脱一抗二抗, 用于 WB 中转移了蛋白的膜的重复利用	100ml	瓶	电询	
A1810	一抗稀释液	产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分。用此稀释液稀释后的一抗可在 2-8℃ 环境下稳定保存至少半年	10ml	瓶	电询	封闭 
A1820	HRP 标记抗体稀释液		100ml			
SW3015	5%BSA 封闭液	即用型无需稀释一般室温封闭半小时至 1 小时	100ml	瓶	电询	
T8220	Tween 20 吐温 20	常以 0.05%的浓度用作一种封闭剂	500ml	瓶	电询	
YA0800	杂交袋	15*25cm	100 个/包	包	电询	
YA0760	抗体孵育盒单格,透明连盖	11.7×6.5×3.4cm, 密封好, 四度过夜不易蒸发	1 个/包	个	电询	
A8020	BSA 牛血清白蛋白 Purity>97%,分子生物学级,组分 V 组分五	本品为标准级别的牛血清白蛋白, 可满足大部分常规实验需求, 如用作免疫封闭剂、组织细胞培养添加剂、蛋白酶稳定剂以及蛋白定量标准品。	5g 25g 100g	瓶	电询	BD Difco
232100	脱脂奶粉 Skim Milk	用于制备配制 ELISA、western 等实验的封闭液	500g	瓶	电询	完达山
GC0019	脱脂奶粉	封闭用	400g	包	电询	
PL00001	预染彩虹蛋白 marker 热销 Hot	分子量范围为 10kD-180kD 红蓝绿三色 泳道为: 10, 15, 25, 35, 45, 60, 75, 100, 140, 180 kDa	2x250 μl	包	电询	
PL00002	预染蛋白 marker 3-245kDa	3, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 75, 100, 140, 180, 245 kDa	2x250 μl	包	电询	
PL00003	预染蛋白 marker 10-310kD	10, 15, 25, 35, 45, 60, 75, 100, 140, 180, 245, ~310 kDa	2x250 μl	包	电询	
26616 26617	预染彩色蛋白 marker	10-180kDa 可用于 50-100 个凝胶泳道, 5-10μl/泳道 10 bands (10, 15, 25, 35, 40, 55, 70, 100, 130, 180 kDa)	2x250 μl 10X250ul	PK	电询	检测 
26625	预染彩色蛋白 marker	40-300kDa (40, 50, 70, 100, 130, 180, 250, 300 kDa)	2x250 μl	PK	电询	
IPVH00010 IPVH00010C	immobilon-P 疏水性 PVDF 转印卷膜 0.45um	PVDF 膜原理为疏水作用, 蛋白吸附更强, 提高了检测的灵敏度。膜染色性能好抗溶剂能力强, 可做多轮杂交 0.45 适用于免疫印迹、斑点印迹及蛋白>20kDa 0.22 适用于分子量<20kDa 蛋白的 Western	26.5×375	1 卷	电询	转印膜 
ISEQ00010 ISEQ00010C	immobilon-PSQ PVDF 转印卷膜 0.22um		26.5×375	1 卷		
3030-861	3MM 杂交滤纸	3MM 杂交滤纸 (0.34mm 厚) 20X20cm	100 片/盒	盒	电询	Whatman
170-3965	半干转用加厚滤纸	规格 7.5X10cm	60 片/盒	盒	电询	
170-3932	湿转用厚滤纸	规格 7.5X10cm	50 片/盒	盒	电询	
165-3354 165-3355 165-3359 165-3360	Mini-PROTEAN Comb 梳子	0.75mm 10 孔梳子 33ul 上样量 0.75mm 15 孔梳子 20ul 上样量 1.0mm 10 孔梳子 44ul 上样量 1.0mm 15 孔梳子 26ul 上样量	5 把/包	包	电询	配件 
165-3310 165-3311 165-3312	Mini-ProteanPlates 带 间隔条的厚玻璃板	边条外板 0.75mm 边条 边条外板 1.0mm 边条 边条外板 1.5mm 边条	5 片/包	包	电询	
165-3308	Short Plates 短玻璃板	7X10cm	5 片/包	包	电询	

第三步——抗体孵育和检测



PROTEINTECH GROUP

云南独家总代 一周到货，无果立退

一抗、二抗、内参、标签抗体首荐品牌

货号	产品名称		应用	报价	优惠价
各种一抗 敬请咨询 或登录 http://www.ptglab.com/ 荣获 CiteAb “2016 年度最佳抗体验证开拓奖” “2019 年度免疫学明日之星奖” 被引用 SCI 文献已超过 45000 多篇.....					
SA00001-1	HRP- Goat Anti-Mouse IgG (H+L)二抗		ELISA,WB,IHC/ICC 更多种属二抗、更多酶标二抗 (HRP、AP、Biotin)、更多荧光素标记二抗 (红色、绿色、蓝色)敬请咨询....	电询	电询
SA00001-2	HRP- Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)二抗			现货供应	现货供应
SA00001-4	HRP- Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) 二抗				
SA00001-15	HRP-Goat Anti-Rat IgG (H+L) 二抗				
66009-1-Ig 20536-1-AP	鼠单抗 兔多抗	Beta-actin 内参抗体 分子量 42kDa	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:500-1:5000	电询	电询
60004-1-Ig 10494-1-AP	鼠单抗 兔多抗	GAPDH 内参抗体 分子量 36kDa	WB 稀释比 1:5000-1:50000 WB 稀释比 1:2000-1:20000		
66031-1-Ig 11224-1-AP	鼠单抗 兔多抗	Alpha-tubulin 内参抗体 分子量 50-55kDa	WB 稀释比 1:2000-1:10000 WB 稀释比 1:500-1:10000		
66240-1-Ig 10094-1-AP	鼠单抗 兔多抗	Beta-Tubulin 内参抗体 分子量 50-55kDa	WB 稀释比 1:2000-1:20000 WB 稀释比 1:500-1:5000		
66005-1-Ig	鼠单抗	6*His, His-Tag 标签抗体	WB 稀释比 1:5000-1:50000		
66008-3-Ig	鼠单抗	Flag Tag 标签抗体	WB 稀释比 1:1000-1:5000		
66002-1-Ig	鼠单抗	GFP tag 标签抗体	WB 稀释比 1:2000-1:20000		

以上内参和标签抗体均可提供 HRP 直接标记的,另可提供多个品牌抗体敬请咨询!可告知抗体的条件帮查询适合的产品!



普通

ECL化学发光检测试剂盒

灵敏

ECL化学发光检测试剂盒

超敏

ECL化学发光检测试剂盒

适合大多数常规实验的检测

检测 ng 级别的抗原

适配蛋白表达丰度较高的western blot检测

背景低, 数据分析更省时

适用于X-光胶片或化学发光或荧光发光的检测

* 检测低丰度蛋白可能出现弱/无条带

适合成像系统捕捉信号

检测 pg 级别的抗原, 节省样品及抗体

适配蛋白表达丰度较低的western blot检测

背景低, 信号稳定持久

* 检测过高/低丰度蛋白可能结果异常

适合成像系统捕捉较弱信号

检测低 pg 级别的抗原, 有效节省样品及抗体

适配蛋白表达丰度低的western blot检测

优化配方, 发光强度及其持久性大力增强

* 检测高丰度蛋白可能出现高背景

货号	产品名称	规格	特价	品牌
B500012、13、14	普通 ECL 化学发光检测试剂盒高灵敏, 检测达 ng 级	100、200、500ml	电询	
B500022、23、24	灵敏 ECL 化学发光检测试剂盒高灵敏, 检测达 pg 级	100、200、500ml	电询	
B500032、33、34	超敏 ECL 化学发光检测试剂盒高灵敏, 检测达 pg 级	100、200、500ml	电询	

显色、显影等其他辅助试剂

货号	产品名称	规格	包装	特价	品牌
XBT-1	医用 X 射线胶片 12.7X17.8cm	5X7in 100 片/盒	1 盒	电询	柯达 Carestream
GC010A	曝光暗盒	5X7in / 8X10in 可选	1 个	电询	国产
DA1010	DAB 显色试剂盒(20x)	HRP 显色底物	2*3ml	电询	
YA0370 / 80	显影粉 / 定影粉配 1L 工作液	2-8℃ 保存, 一年有效	1 瓶	电询	



云南泽浩商贸有限公司 Promega / BI / Stemcell / ACD / Peprtech / Proteintech / Wako / MCE 等---云南总代理

电话: 0871-65100545、65100597 免费订货热线及企业 QQ 服务号: 400-8700-545

邮箱: admin@kmzehao.com

公司网站: <http://www.kmzehao.com>



关注微信号: ymzehao



关注QQ号: 4008700545