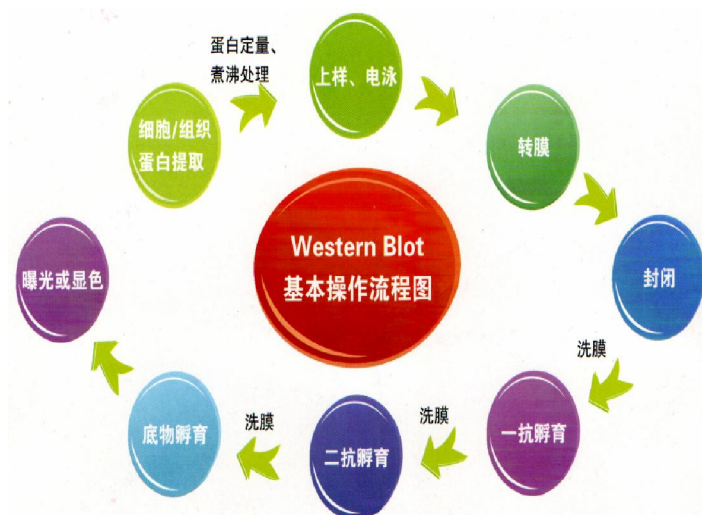




泽浩科技

2014 Western Blot 完美解决方案

关注泽浩科技微信
微信号: zh4008700545加入泽浩科技QQ
订购QQ: 400 8700 545

产品编号	P0013	P0013I	P0013I	P0013I	P0013I	P0013I
产品名称	Western及IP细胞裂解液	RIPA裂解液(强)	RIPA裂解液(中)	RIPA裂解液(弱)	NP-40裂解液	SDS裂解液
产品价格	172.00元	192.00元	192.00元	192.00元	192.00元	192.00元
有效裂解成分	1% Triton X-100	1% Triton X-100, 1% deoxycholate, 0.1% SDS	1% NP-40, 0.5% deoxycholate, 0.1% SDS	1% NP-40, 0.25% deoxycholate	1% NP-40	1% SDS
裂解强度	温和	强	中	温和	温和	强
对膜蛋白的提取	一般	很好	较好	一般	一般	很好
对胞浆蛋白的提取	很好	很好	很好	很好	很好	很好
对核蛋白的提取	较好	很好	较好	较好	较好	很好
胞浆磷酸化蛋白提取	很好	很好	很好	很好	很好	很好
细胞核转录因子提取	很好	很好	很好	很好	很好	很好
含蛋白酶抑制剂	是	是	是	是	是	是
含磷酸酯酶抑制剂	是	是	是	是	是	是
主要用途	WB, IP, co-IP	WB, IP	WB, IP	WB, IP, co-IP	WB, IP, co-IP	WB, ChIP

第一步-----样品地提与制备/蛋白酶抑制剂

货号	产品名称	描述	规格	单位	促销价	品牌
E211-01	总蛋白提取试剂盒	适用于各种原代或传代细胞以及各种实体软组织, 含蛋白酶抑制剂, 与下游应用如 1D, 2D 电泳, WB, IP 等兼容	50 次 100 次	Kit	电询	Vazyme 唯赞生物
E221-01	核蛋白/胞质蛋白提取盒	800 元/100 次 用于 2D 分离, EMSA 分析和其它应用	50 次	Kit	电询	
E231-01	膜蛋白提取试剂盒	1200 元/100 次与下游应用如 1D, 2D 电泳, WB, IP 等兼容	50 次	Kit	电询	
E311-01	RIPA 裂解液	细胞组织快速裂解液, 含有 NP-40 和 SDS, 具有较强的裂解作用, 与下游应用如 WB, IP 等兼容	50ml 100ml	瓶	电询	
P0013	Western 及 IP 细胞裂解液	用于普通的 Western、IP 或 co-IP, 推荐使用 P0013, 不必采用超声处理等就可以非常理想地用于后续操作。另外该裂解液裂解的产物也适合用于磷酸化蛋白的 Western 检测。 对于某些特殊蛋白的 IP, 如果发现 P0013 效果不是非常理想, 可以尝试用 RIPA 裂解液或 NP-40 裂解液。 对于某些难溶解蛋白的 Western, 如果发现 P0013 效果不是非常理想, 可以尝试使用裂解强度更高的裂解液例如 RIPA 裂解液(强、中)或 SDS 裂解液。	100ml	瓶	电询	碧云天 Beyotime
P0013B	RIPA 裂解液(强)		100ml	瓶	电询	
P0013F	NP-40 裂解液		100ml	瓶	电询	
P0013G	SDS 裂解液		100ml	瓶	电询	
P0027 P0028	细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒	抽提得到的蛋白可以用于 Western, EMSA, footprinting 报告基因检测以及酶活力测定等后续操作。	50 次 100 次	瓶	电询	Promega
P0033	细胞膜蛋白与细胞浆蛋白提取试剂盒	含有蛋白酶抑制剂、磷酸酯酶抑制剂和 EDTA 等, 需自备 PMSF	100 次	瓶	电询	
C3601	细胞线粒体分离试剂盒	分离得到的线粒体也可以被试剂盒中的线粒体裂解液裂解后用于 SDS-PAGE、Western、双向电泳等	50-100 次	瓶	电询	
C3606	组织线粒体分离试剂盒		50-100 次	瓶	电询	
ST506	PMSF(100mM)	含粉末, 溶剂, 第一次使用前预混	10ml	瓶	电询	Promega
0219538101	PMSF 苯甲基磺酰氟	常用生化试剂, 用于抑制蛋白酶, 蛋白组学级	1g	瓶	电询	
G6521	Protease Inhibitor Cocktail, 50X	蛋白酶抑制剂混合物, 50 X 是针对不同靶蛋白酶的六种不同蛋白酶抑制剂的混合物。该产品以冻干的形式提供, 可用 100% 乙醇或 DMSO 重悬。	1ml	瓶	电询	
4693124001	Complete, Mini,	蛋白酶抑制剂, for 10ml each, 铝箔包装	30tablets	PK	电询	
4906845001	PhosStop™	磷酸酶抑制剂, for 10ml each, 铝箔包装	10tablets	瓶	电询	Promega
V8571 V8572	FastBreak™ Cell Lysis Reagent, 10X	有效地、温和地裂解 E. coli 培养物中重组蛋白, 无需离心, 无需对细胞进行机械破碎处理。直接加入培养物中。	15ml 60ml	瓶	电询	

重组表达蛋白纯化磁珠

货 号	产 品 名 称	描 述	规 格	单 位	促 销 价	品 牌
70501-5	蛋白纯化磁珠 Ni 镍	His-tag 组氨酸标签蛋白纯化，粗样品中直接纯化目标蛋白， 无需高速离心和过滤，无需昂贵层析设备	5ml	瓶	电 询	Beaver 海狸 促销截止至 2014.6.30
70502-5	蛋白纯化磁珠 Co 钴		5ml	瓶	电 询	
70601-5	GST 融合蛋白纯化磁珠	快速纯化谷胱甘肽 S-转移酶 GST 融合蛋白	5ml	瓶	电 询	
22201-20	免疫沉淀 IP 磁珠试剂盒	200nm 磁珠和 500nm 磁珠可选，浓度 2mg/ml，含全套 IP 试剂	20 次	盒	电 询	Proteintech
KIP	免疫沉淀 IP 试剂盒	非磁珠法，试剂齐全，您只需准备样品和抗体即可	20 次	盒	电 询	

2 蛋白定量

货 号	产品名称	规 格	单位	报 价	品牌
NCI3227CH	BCA 蛋白定量分析试剂盒（中文标签） 含蛋白标准。检测限 20-2000ug/ml，不受样本中去污剂的影响	2500 次微孔板	1kit	电询	 美国 Pierce
NCI3225CH		5000 次微孔板	1kit	电询	
P0006	Bradford 蛋白浓度测定试剂盒，含蛋白标准。检测浓度下限达到 25µg/ml，最小检测蛋白量达到 0.5µg	1000 次微孔板	1kit	电询	
P0010S	BCA 蛋白浓度测定试剂盒(增强型)，可以兼容样品中高达 5% 的 SDS、Triton X-100、Tween 20,60,80。检测浓度下限达到 10µg/ml，最小检测蛋白量达到 0.2µg。	200 次微孔板	1kit	电询	
P0010		500 次微孔板			
P0009		5000 次微孔板			
218054980	BSA 牛血清白蛋白 Standard Grade	100g	1PK	电询	
04821616	考马斯亮蓝 R250	25g	1PK	电询	
04808274	考马斯亮蓝 G250	10g	1PK	电询	



样品浓缩、脱盐、更换缓冲液 在组织、细胞的破碎机抽提过程中，蛋白样品往往被稀释，而且带有高盐成分，使其不能直接用于 WB 分析，所以您需要超滤来处理蛋白样品。

选择小软件，敬请咨询



超滤管应用领域

- 病毒和噬菌体的浓缩
- 核酸纯化、浓缩及脱盐
- 未结合标记物的去除
- 抗体的快速浓缩
- 样品中去垢剂的去除
- 酶的浓缩、脱盐
- 双向电泳样品的制备
- 尿液的浓缩
- 法医鉴定分析样品的预处理

货 号	产 品 名 称	规 格	处理量	优惠价
UFC5003	离心超滤管 Amicon Ultra-0.5 适合 1.5ml 离心机转子	单个购买	0.5ml	电 询
倒转离心回收样品	Amicon Ultra-0.5 按整包装购买特价 30K 以上价格不同；分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电 询
		96 个/盒	15-20ul	电 询
UFC8003	离心超滤管 Amicon Ultra-4 适合 15ml 离心机转子	单个购买	4ml	电 询
吸头回收样品	Amicon Ultra-4 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电 询
		96 个/盒	15-70ul	电 询
UFC9005	离心超滤管 Amicon Ultra-15 适合 50ml 离心机转子	单个购买	15ml	电 询
吸头回收样品	Amicon Ultra-15 离心超滤系统按整包装购买特价 分子量可选：3、10、30、50、100K Da	24 个/盒	浓缩后	电 询
		96 个/盒	200ul	电 询
MD34-3.5	透析袋 直径:27mm (MW):3500 (MW):7000 可选		5 米/卷	电 询
MD34-8	透析袋 直径:21mm、27mm、36mm 可选	8000-14000	5 米/卷	电 询
TXJ-5cm	国产 5cm 透析夹	5cm	个	电 询

第二步-----电泳和转膜、封印

1、预制胶

货 号	产 品 名 称	凝胶浓度%	参考分离蛋白分子量	优惠价
W002-1	蛋白电泳预制胶 10 孔 10 片/盒 凝胶尺寸：8.6X6.8X0.1cm 胶板尺寸：10X8X0.46cm  南京建成	梯度 4-20%	205-6.5 Kda	电 询
W002-2		梯度 4-15%	205-14 Kda	
W002-5		固定浓度 8%	200-25 Kda	
W002-6		固定浓度 10%	15-100 Kda	
W002-7		固定浓度 12%	10-70 Kda	
W002-8		固定浓度 15%	12-45 Kda	

2、电泳和转膜、封闭等其他辅助试剂、耗材、配件

本促销单所有碧云天品牌产品单次购买金额不足 600 需加 20 元运费

货 号	产 品 名 称	描 述	规 格	单 位	促 销	品 牌
P0012A	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒	用户只需自备制胶器具和蒸馏水，即可配制 PAGE 胶	30-50 块胶	盒	电询	碧云天 Beyotime
P0014B	SDS-PAGE 电泳液	使用时每个包装加蒸馏水溶解，定容到一升即可使用。	10×1L	盒	电询	
P0015	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X)	经过改良的以溴酚蓝为染料，5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。	2ml 15ml	瓶	电询	
P0017A	考马斯亮蓝染色试剂盒 (常规法)	以考马斯亮蓝 R250 为染料，用于蛋白电泳凝胶的常规染色和脱色，或 Western 转膜后 PAGE 胶上残余蛋白的检测	100ml 染 500ml 脱	盒	电询	
P0017S	快速银染试剂盒	可以用于 2D 凝胶的银染	25 次	盒	电询	
ST003	30% Acr-Bis (29:1)	30%丙烯酰胺(29:1)	100ml	瓶	电询	
ST004	40% Acr-Bis (39:1)	40%丙烯酰胺（37.5:1）	100ml	瓶	电询	
021906	Ponceau S 丽春红	猩红，用于对硝酸纤维素或 PVDF 膜上的蛋白质进行染色	10g	瓶	电询	美国 MP
26616	预染彩色蛋白 marker	10-170kDa 可用于 50-100 个凝胶泳道，5-10μl/ 泳道 10 bands (10, 15, 25, 35, 40, 55, 70, 100, 130, 170 kDa)	2x250 μl	PK	电询	ThermoFisher SCIENTIFIC
26610	未预染蛋白 marker	14.4-116 kDa (14.4, 18.4, 25, 35, 45, 66.2 and 116 kDa)	2X1ml	PK	电询	
26614	未预染蛋白 marker	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 150, 200	2x250 μl	PK	电询	
P0021B	Western 转膜液	湿法电转膜，无需调节 pH 值。粉末自配	10×1L	PK	电询	碧云天 Beyotime
P0021D	Western 半干法转膜液	半干法电转膜。无需调节 pH 值。粉末自配	10×1L	PK	电询	
P0023A	Western 一抗稀释液	用于一抗的稀释和配制	100ml	瓶	电询	
P0023B	Western 封闭液	减小后续的抗体和膜的结合，降低背景增强信噪比	100ml	瓶	电询	
P0023C	Western 洗涤液	用于 Western 时一抗或二抗孵育后的洗涤	250ml	瓶	电询	
P0023D	Western 二抗稀释液	用于 Western 时二抗的稀释	100ml	瓶	电询	
P0025N	Western 一抗二抗去除液	中性，用于 Western 中转移了蛋白的膜的重复利用	250ml	瓶	电询	
218054980	BSA 牛血清白蛋白	Standard Grade	100g	瓶	电询	美国 MP
GC0019	脱脂奶粉		400g	包	电询	完达山
165-3354	Mini-PROTEAN Comb 梳子	0.75mm 10 孔梳子 33ul 上样量	5 把/包	包	电询	BIO-RAD
165-3355		0.75mm 15 孔梳子 20ul 上样量	5 把/包	包	电询	
165-3359		1.0mm 10 孔梳子 44ul 上样量	5 把/包	包	电询	
165-3360		1.0mm 15 孔梳子 26ul 上样量	5 把/包	包	电询	
165-3310	Mini-ProteanPlates 带间隔条的厚玻璃板	边条外板 0.75mm 边条	5 片/包	包	电询	
165-3311		边条外板 1.0mm 边条	5 片/包	包	电询	
165-3308	Short Plates 短玻璃板		5 片/包	包	电询	
170-3965	半干转用加厚滤纸	规格 7.5X10cm	60 片/盒	盒	电询	
170-3932	湿转用厚滤纸	规格 7.5X10cm	50 片/盒	盒	电询	
3030-861	3MM 杂交滤纸	厚 0.34mm 规格 20x20cm	100 片/盒	盒	电询	Whatman

3、Millipore 转印膜

纤维素膜原理为静电吸附。PVDF 膜原理为疏水作用，蛋白吸附更强，提高了检测的灵敏度。膜染色性能好，抗溶剂能力强，方便做多轮杂交。与多数染色法和检测方法都兼容。

货 号	产 品 名 称	规 格 cm	单 位	优 惠 价
HATF00010	Immobilon - NC 膜，混合纤维素酯转印卷膜	30×300	1 卷	电询
IPVH00010	immobilon-P 疏水性 PVDF 转印卷膜 0.45um	26.5×375	1 卷	电询
IPVH00010-C	适用于免疫印迹、斑点印迹及蛋白>20kDa	15X13.25	1 片	电询
ISEQ00010	immobilon-PSQ 疏水性 PVDF 转印卷膜 0.22um	26.5×375	1 卷	电询
ISEQ00010-C	适用于分子量<20Kda 蛋白的 Western	15X13.25	1 片	电询



第三步-----抗体筛选和检测

一抗、二抗、内参、标签抗体首荐品牌



PROTEINTECH group

云南独家总代 一周到货，无果立退

货 号	产 品 名 称	应 用	报 价	优惠价
各种一抗	敬请咨询 或登录 http://www.ptglab.com/	提供专利：CD 分子相关、凋亡相关、自噬相关、干细胞相关等	电询	电询
SA00001-1	HRP- Goat Anti-Mouse IgG (H+L)二抗	ELISA, WB, IHC/ICC 更多种属二抗、更多酶标二抗 (HRP、AP、Biotin)、更多荧光素标记二抗 (红色、绿色、蓝色) 敬请咨询....	电询	电询
SA00001-2	HRP- Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) 二抗			
SA00001-4	HRP- Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) 二抗			
SA00001-15	HRP-Goat Anti-Rat IgG (H+L) 二抗			
60008-1-Ig	鼠单抗	Beta-actin 内参抗体 分子量 43kDa, 适用胞浆和全细胞	WB 稀释比 1:2000-1:20000	电询
66009-1-Ig	鼠单抗		WB 稀释比 1:5000-1:50000	
20536-1-AP	兔多抗		WB 稀释比 1:500-1:5000	
60004-1-Ig	鼠单抗	GAPDH 内参抗体 分子量 30-40kDa	WB 稀释比 1:5000-1:50000	
10494-1-AP	兔多抗		WB 稀释比 1:2000-1:20000	
66031-1-Ig	鼠单抗	tubulin-Alpha 内参抗体 分子量 55kDa	WB 稀释比 1:2000-1:10000	
11224-1-AP	兔多抗		WB 稀释比 1:500-1:5000	
66005-1-Ig	鼠单抗	6*His tag 标签抗体 应用范围：WB, IP, ELISA	WB 稀释比 1:5000-1:50000	
10001-0-AP	兔多抗		WB 稀释比 1:1000-1:5000	
66001-1-Ig	鼠单抗	GST tag 标签抗体 应用范围：WB, IP, ELISA	WB 稀释比 1:5000-1:50000	
10000-0-AP	兔多抗		WB 稀释比 1:1000-1:5000	

以上内参和标签抗体均可提供 HRP 直接标记的，另可提供多个品牌抗体敬请咨询



化学发光底物

货 号	产 品 名 称	规 格	单 位	特 价	品 牌
20-500-120	EZ-ECL Kit HRP 化学发光增强试剂盒 可达 pg 水平	120ml、1200cm2	1 套	电询	Bioind
WBKLS0100	Immobilon Western HRP 化学发光底物	100ml、1000cm2	1 套	电询	Millipore
NCI5080	SuperSignal West Pico HRP 化学发光底物 中文标签	500ml、5000cm2	1 套	电询	Pierce

显色、显影等其他辅助试剂

货 号	产 品 名 称	规 格	包 装	报 价	品 牌
XBT-1	X 光片	5X7in 100 片/盒	1 盒	电询	柯达
GC010A	曝光暗盒	5X7in / 8X10in 可选	1 个	电询	国产
S3841	WesternBlue BCIP/NBT	AP 显色底物 100ml	1 PK	电询	Promega
W4121	TMB 稳定型底物	HRP 显色底物 100ml	1 PK	电询	
E517-01	TMB 显色液(单组份)	HRP 显色用 100ml	1 PK	电询	Vazyme
P0203	DAB HRP 显色试剂盒	共 100ml	1 PK	电询	碧云天
GC008 / 9	显影粉 / 定影粉	配 1L 工作液	1 瓶	电询	国产
GC210	显影液定影液套装	含显影定影各 20L	套	电询	乐凯



昆明泽浩科技有限公司 Promega /beckman/Peprotech /ebioscience /BI / Proteintech---云南总代理

电话：0871-65100545、65100597

免费订货热线：400-8700-545

企业 QQ 在线订货：4008700545

邮箱：admin@kmzehao.com

公司网站：<http://www.kmzehao.com>